

Como visualizar meus exames de imagem?

Para visualizar seus exames, acesse <http://www.unimedsjc.com.br> e clique em **Resultado de Exames de Imagem**. Informe seu **protocolo** e **senha**, recebidos no momento do atendimento.



Se você já tiver uma conta cadastrada no ClickVita, é possível entrar com seu e-mail e senha. Neste caso é necessário informar seu endereço de e-mail para que seus exames sejam vinculados à sua conta existente.



Entrar

Campo obrigatório.

Campo obrigatório.

[Entrar](#)

[Esqueci minha senha](#)

[Criar uma conta](#) [Sou médico](#)

Caso ocorra algum problema na visualização de laudos e imagens, ou seja necessário recuperar o número de protocolo e a senha, entre em contato através das alternativas abaixo:

✉ sac.cdi@unimedsjc.coop.br

☎ 0800 727 4141



Após acessar a plataforma, você pode visualizar o laudo e as imagens de seus exames, se houver. Basta clicar nos respectivos ícones ao lado direito da descrição do exame, conforme destaque abaixo:

Sair

Unimed São José dos Campos

Paciente exemplo

Data de nascimento: 10/07/1950 Sexo: Masculino Telefone: E-mail:

[Exibir todos](#)

Data de entrega	Modalidade	Descrição	Data de atendimento	Laudos e Imagens
▼ Paciente exemplo				
29/03/2019	MR	RM - Pelve (Não Inclui Articulações Coxofemorais)	29/03/2019	 

Não é possível salvar ou imprimir as imagens. Os laudos e imagens são de responsabilidade da clínica. Caso os resultados não estejam disponíveis entre em contato com a clínica responsável.

 Crie uma conta e comece a utilizar os benefícios do Clickvita

 Construa seu histórico clínico e não pague nada por isso

 Seja avisado sobre exames prontos e acesse quando e onde desejar

[Criar conta](#)



Visualização de Laudos

Ao clicar no ícone de Laudo, o mesmo será exibido conforme exemplo abaixo:



Paciente			Tipo Atend.	Externo
Nr. Atend.		Nr. Prescr.	Sexo	M
Dt. Nasc.		Idade	68 anos	Bairro
Endereço				Telefone
Cidade	Sao Jose dos Campos - SP	Digitador (a)		Tel. Celular
Convênio	Unimed Local	Médico Sol.	Dr.	
Data Entrada	29/03/2019	Data Exame	29/03/2019	
Exame	RM Pelve (Não Inclui Articulações Coxofemorais)			

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

TÉCNICA: Exame realizado com seqüências multiplanares: T1, T2, STIR e T2 SPIR.
Com/Sem a administração endovenosa do gadolínio foram obtidas seqüências ponderadas em T1, sem e com supressão de gordura.

RELATÓRIO:

Estruturas ósseas de morfologia e características de sinal preservadas.

Grupos musculares de aspecto anatômico.

Planos gordurosos do subcutâneo sem alterações.

Tendões com trajeto, espessura e intensidade de sinal normais.

Trajetos neurovasculares sem particularidades.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:
Ressonância Magnética xxxxxx dentro dos padrões da normalidade.

Visualizador de laudos

Visualização de Imagens


Ao clicar no ícone de Imagens, será aberto o Visualizador Web das imagens:



Visualizador Web de imagens


Visualização de Séries

Dependendo do tipo do exame, suas imagens podem estar agrupadas por séries de imagens. Para alternar entre as séries de imagens, clique no botão Barra de Séries no canto superior esquerdo da tela e escolha a série desejada, clicando na mesma:

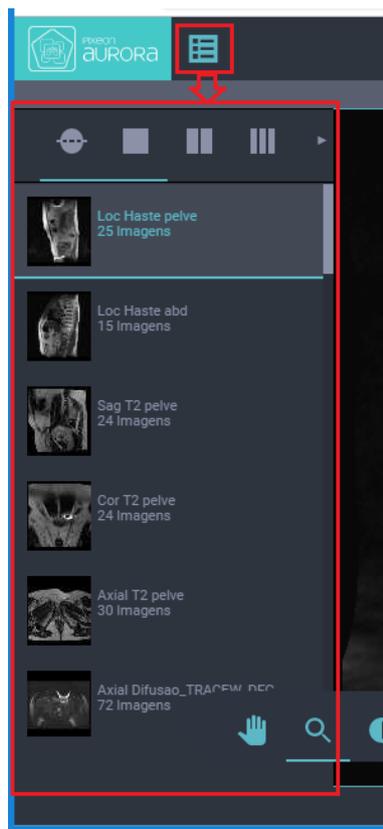

Barra de séries

É possível escolher o layout das séries (a forma como as séries serão exibidas), de apenas uma série até 4 séries. O visualizador traz as séries por ordem, mas você pode escolher as que quiser. Basta selecionar a série clicando com o botão esquerdo do mouse, manter o botão pressionado e arrastar a série para o painel desejado.

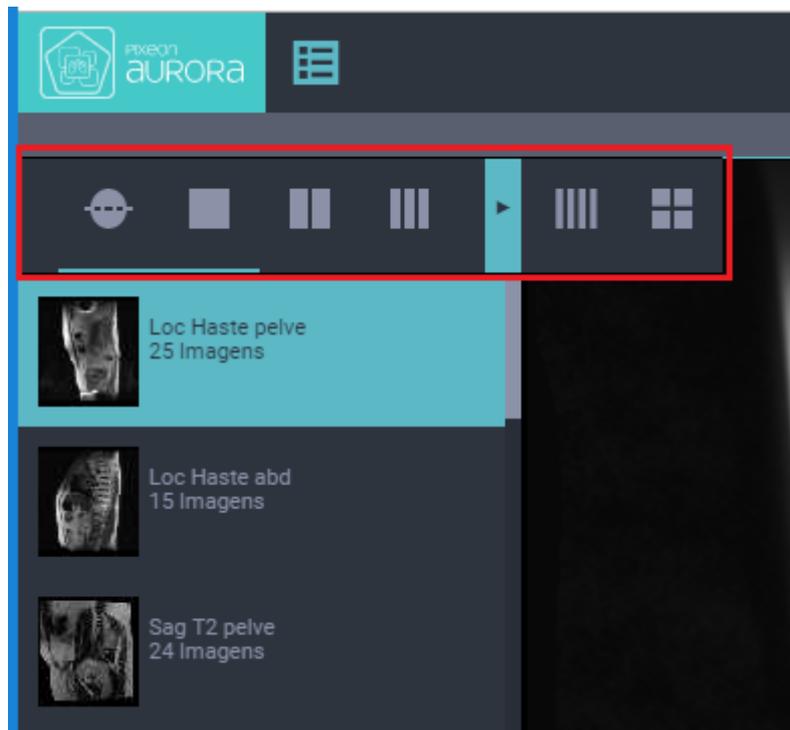

Opções de layout dentro da Barra de séries

Também é possível exibir a linha de referência. As linhas de referência mostram a posição de uma série em relação à outra, quando duas ou mais séries do mesmo exame estiverem abertas.




Layout 1x3 com linha de referência.

Barra de Ferramentas

O Visualizador também permite aplicar zoom, janelamento, entre outras funções. Ao passar o mouse sobre elas, suas funções serão exibidas. Segue abaixo uma breve explicação das principais funções.

 Para visualizar ou esconder a barra de ferramentas, é só clicar no ícone  ou  no canto inferior direito da tela.

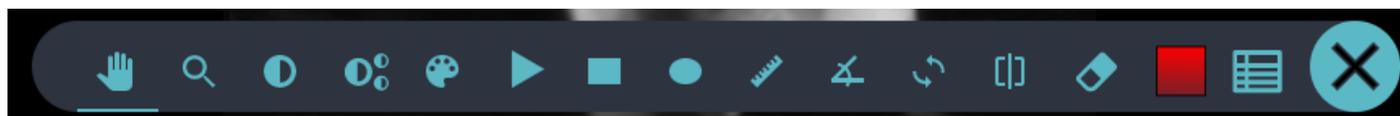

Barra de ferramentas

Deslocamento: Permite mover a imagem. Para aplicar o deslocamento na imagem, selecione o ícone e mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado, arrastando-o.

Zoom: Para aplicar zoom na imagem, selecione o ícone e mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado, arrastando-o. A porcentagem de zoom será mostrada no canto inferior direito da tela.

Janelamento: O janelamento é um ajuste de brilho e contraste da imagem. Para aplicar janelamento na imagem, selecione o ícone e mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado, arrastando-o. Os valores de janelamento serão mostrados no canto inferior direito da tela. W indica largura (*width*), que é a amplitude da janela na escala *Hounsfield* que será usada na imagem. Ela altera o contraste da imagem. L indica o nível (*level*) da janela. Este deve ser o valor do tom de cinza correspondente à densidade média da estrutura a ser analisada. Ele altera o brilho da imagem.

Também é possível escolher janelamentos pré-definidos através do ícone 

 As ações de deslocamento, zoom e janelamento estão fixadas nos botões do mouse: esquerdo para zoom, botão do meio (scroll) para janelamento e direito para deslocamento. Os botões do meio e da direita são fixos, enquanto a ação do botão esquerdo pode ser alterada, selecionando a opção desejada na barra de ferramentas.

Paleta: É possível inserir paletas de cores pré-definidas. Para isso, clique no ícone e selecione a paleta desejada.

Retângulo: O retângulo é uma ferramenta para medições de áreas retangulares. Ela nos proporciona algumas medidas como: perímetro em cm, área em cm², média (*hu*), desvio (*hu*), mínima e máxima (*hu*). Selecione esta opção através do ícone. Para redimensionar o retângulo, clique nas extremidades e movimente-o, mantendo pressionado o botão esquerdo do mouse.

Elipse: Esta função faz medições na imagem através da elipse. Esta ferramenta nos proporciona algumas medidas como: perímetro em cm, área em cm², média (*hu*), desvio (*hu*), mínima e máxima (*hu*). Selecione esta opção pelo ícone. Para redimensionar a elipse, clique nas extremidades e movimente-a, mantendo pressionado o botão esquerdo do mouse.

Régua: Através da régua é possível fazer medições na imagem. Selecione a régua através do ícone. Para alterar o seu tamanho, clique em uma das extremidades, arrastando no comprimento desejado. O comprimento é apresentado em milímetros.

Ângulo: Com esta ferramenta, basta traçar duas retas (que se cruzem ou não) para a medida ser calculada. Sempre será mostrado o ângulo interno e o adjacente. Clique no ícone para inserir o ângulo. Para movimentá-lo, clique nas extremidades e arraste, mantendo pressionado o botão esquerdo do mouse.

Rotação: Através desta ferramenta é possível rotacionar a imagem 90° para esquerda ou para a direita. Clique sobre o ícone e escolha a opção de rotação.

Espelhamento: Com esta ferramenta podemos espelhar a imagem verticalmente ou horizontalmente. Clique sobre o ícone e escolha a opção de espelhamento.

Restaurar imagem e apagar anotações: restaura a imagem original, retirando janelamento, paletas, etc. e apaga as anotações (régua, ângulo, etc.).

Cor da anotação: É possível escolher a cor das anotações (régua, elipse, etc.).